

# Chesbrough™

Fil de Localisation Mammaire

DISPONIBLE  
CHEZ BARD

Conçu pour une mise en place  
simple, rapide et sécurisée

*Double ergot*



**BARD**

**BIOPSY SYSTEMS**

A Business Unit of  
Bard Peripheral Vascular, Inc.


# Chesbrough™

## Fil de Localisation Mammaire

Le fil de localisation Chesbrough™ de Bard possède la dernière innovation dans le domaine du repérage mammaire : le double ergot. Ce double ergot exclusif se situe à l'extrémité distale du fil et a été conçu pour minimiser le risque de migration une fois mis en place. Un premier marqueur radio-opaque est placé au centre des deux ergots et un deuxième marqueur palpable est placé en arrière du fil de localisation afin d'en faciliter le déploiement.

### Caractéristiques et Avantages

- Double ergot conçu pour minimiser le risque de migration une fois mis en place
- Le marqueur radio-opaque entre les deux ergots permet de minimiser le risque de dépassement de la lésion lors de la mise en place.
- Le marqueur, positionné à l'arrière du fil de localisation, sert de référence à la palpation et facilite ainsi le déploiement
- Le diamètre du harpon est 0,28 mm
- L'embout à l'extrémité facilite la mise en place
- Disponible en plusieurs longueurs : 5, 7 et 9 cm
- Le marquage centimétrique sur l'aiguille est utilisé comme référence pour accéder à la lésion
- L'extrémité distale de l'aiguille est échogène pour faciliter sa mise en place sous guidage échographique
- L'aiguille est siliconée pour une meilleure insertion

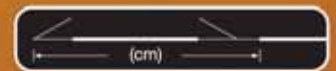

La longueur annoncée correspond à la distance entre la pointe du fil de localisation et le début du marqueur palpable

### Informations

#### Fil de Localisation Chesbrough™

Code Produit	Introduceur : Aiguille 19G	Longueur
460519	Aiguille : 5 cm, fil : 15 cm	7,3 cm
460719	Aiguille : 7 cm, fil : 20 cm	9,3 cm
460917	Aiguille : 9 cm, fil : 20 cm	11,3 cm

Conditionnement : 10 par boîte

<b>AUSTRIA</b>	Bard Medica SA, Thaliastrasse 125A/1/5, 1160 Wien, Austria. Tel: +43 14 949130. Fax: +43 14 94913030
<b>BENELUX</b>	Bard Benelux n.v., Hagelberg 2, 2250 Olen, Belgium. Tel: +32 14 286950. Fax: +32 14 286955
<b>FRANCE</b>	Bard France SAS, Av. Joseph Kessel 164-166, Parkile P14, 78960 Voisins-le-Bretonneux, France. Tel: +33 1 39305858. Fax: +33 1 39305859
<b>GERMANY</b>	C.R. Bard GmbH, Wachhausstrasse 6, 76227 Karlsruhe, Germany. Tel: +49 721 94450. Fax: +49 721 9445111
<b>GREECE</b>	Bard Hellas SA, 22, Alkiviadou St & 72, Vouliagmenis Av, 16675 Glyfada, Greece. Tel: +30 210 9690770. Fax: +30 210 9628810
<b>ITALY</b>	Bard S.p.A., Via Cina 444, 00144 Roma, Italy. Tel: +39 06 524931. Fax: +39 06 5295852
<b>NORDIC</b>	Bard Norden AB, Karbingatan 22, 254 67 Helsingborg, Sweden. Tel: +46 42 388000. Fax: +46 42 386010
<b>PORTUGAL</b>	C.R. Bard Portugal,LDA, Rua Castilho 13D-2A, 1250-066 Lisboa, Portugal. Tel: +351 21 3190330. Fax: +351 21 3190339
<b>SPAIN</b>	Bard de Espana S.A., Avda. Diagonal 652-656, Edificio A, 4a planta, 08034 Barcelona, Spain. Tel: +34 93 2537800. Fax: +34 93 2537834
<b>SWITZERLAND</b>	Bard Medica SA, Seestrasse 64, 8942 Oberrieden/Zürich, Switzerland. Tel: +41 44 255360. Fax: +41 44 255370
<b>UK</b>	Bard Limited, Forest House, Tilgate Forest Business Park, Brighton Road, Crawley, West Sussex RH11 9BP, UK. Tel: +44 1293 527888. Fax: +44 1293 552428

**BARD**

**BIOPSY SYSTEMS**

A Business Unit of  
Bard Peripheral Vascular, Inc.

Veuillez consulter l'étiquetage et la notice d'utilisation pour les indications, contre-indications avertissements et instructions d'utilisation.

BARD est une marque déposée de C.R.Bard, Inc ou de ses filiales.

Chesbrough est une marque déposée de C.R.Bard, Inc ou de ses filiales.

2007 C.R.Bard, Inc. Tous droits réservés

E052 - 1107-S11622-